


复百澳生物
LV-ZsGreen-Neomycin
说明书

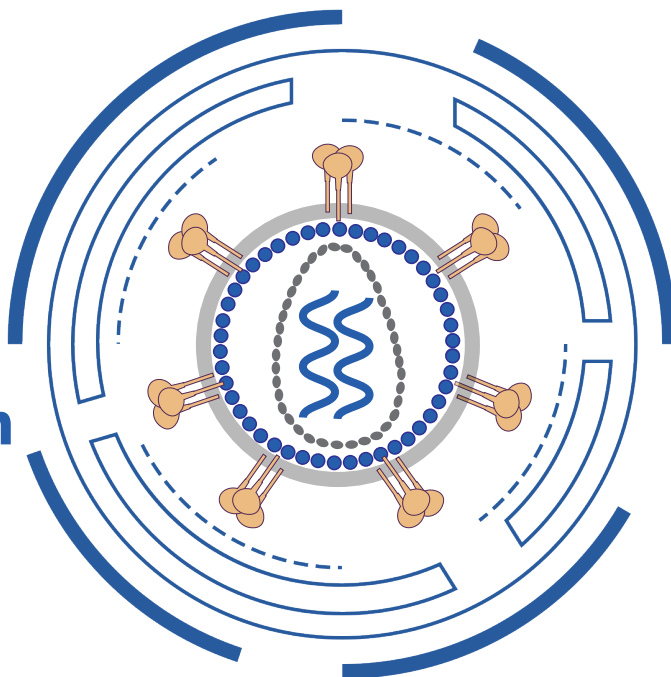

| 产品名称

通用名称: LV-ZsGreen-Neomycin

| 产品货号与规格

货 号: FLV160

规 格: 5支/盒, 200 μ L/支

| 存储条件及有效期

冻存于-80 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C以下, 有效期大于12个月。

| 主要成分

葡萄糖、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠、氯化钾和慢病毒。


| 产品概述

ZsGreen 基因是从珊瑚分离出的绿色荧光蛋白, 在哺乳动物细胞内其亮度要强于 GFP 蛋白。本产品通过化学合成的方式获得 ZsGreen 基因全序列, 将其构建至慢病毒载体。和 psPAX2 及 pMD2G 辅助质粒共转 HEK293T 细胞获得慢病毒颗粒, 所获得的慢病毒可以感染细胞使其 稳定表达。

| 产品侵染示意图



100X b

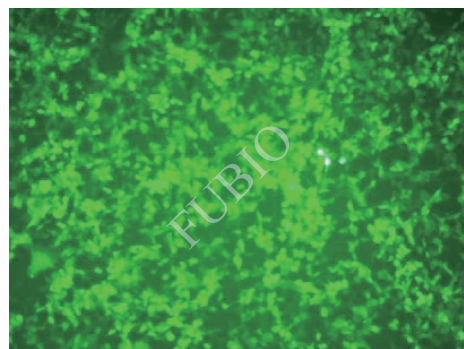

100X g

| 使用方法


根据不同细胞的 MOI(MOI 是 multiplicity of infection 的缩写, 中文译为感染复数, 实际的含义即为每个细胞被多少个有活力病毒所感染)和需要感染的细胞量以及病毒滴度, 计算所需要的病毒量, 然后将所需的病毒加入事先准备好的细胞培养体系中, 培养12小时左右即可换成完全培养基正常培养。一般培养至第24-48小时, 可在荧光显微镜下观察病毒感染细胞情况。

我们建议您在[使用我们的产品前进行预实验摸索最适 MOI 值](#)或[查阅相关文献](#)后再进行实验。

| 注意事项

- 1) 实验操作需要在BSL-2实验室和Class II 生物安全柜条件下进行, 并穿戴好实验服、口罩和手套等个人防护用品;
- 2) 如果实验时本品不慎溅出, 请立即使用84消毒液对其进行灭活处理, 如果溅到眼睛、皮肤或其他身体部位请立即使用大量清水冲洗;
- 3) 使用本品所产生的实验废弃物需要通过高压灭菌处理后按照医疗废弃物处理要求进行处理。

| 载体图谱

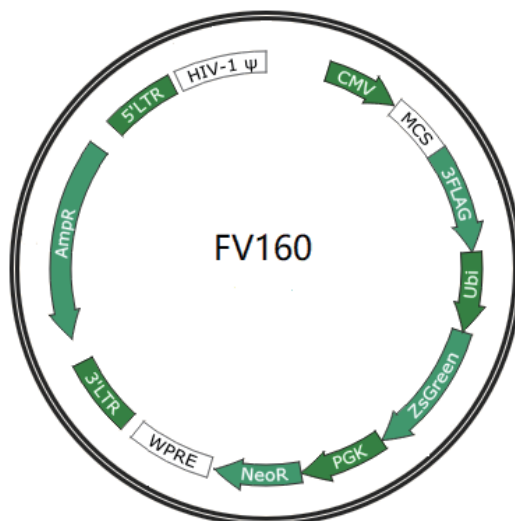

专注基因递送，守护生命健康

We are dedicated to gene delivery, to protect life-health



● 联系我们

● Add: 苏州工业园区朝前路21号生物医药产业园五期C区17栋/F4
4th Floor, Building C17, BioBAY phase 5,
21 Chaoqian Rd, Suzhou Industrial Park, China

☎ Tel: 400-8792-452 (技术热线)

🌐 Web: www.fubio.cn

✉ Email: fubio@fubio.cn